

arthrocare

Automatik

Technische Daten

Abmessung Steuergerät:	140 x 84 x 25 mm
Frequenzen manuell:	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Hz
Frequenzen Automatik:	2, 3, 5, 8 Hz
Betriebsspannung:	9V DC Batterie TYP 6F22 intern
Gerätekategorie:	Typ B
Schutzklasse:	I
Nennstrom:	1,2 mA
Impulsform:	Rechteckimpuls
Magnetische Flussdichte:	+/- 0,05 mT



Equimag GmbH

Pulsierende Magnetfeld-Therapie-Systeme für Pferde & Kleintiere

Am Berg 25
D-36396 Steinau

Telefon +49 (0) 6663 919191
Fax +49 (0) 6663 919192


info@equimag.de
www.equimag.de

Ihr Ansprechpartner in der Schweiz:

www.pferdephysiotherapeutin.ch

Ihr Ansprechpartner in Österreich:

www.tiermassage-ausbildung.at

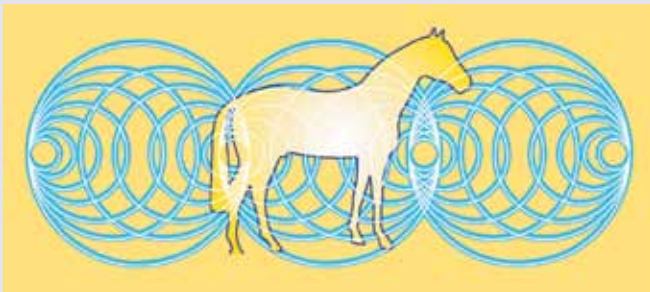

www.equimag.de



Gesunde Pferdebeine

Pferdebeine müssen sorgfältig gepflegt und bei Erkrankungen frühzeitig behandelt werden. Der Dank dafür sind gesunde Beine und eine gute Beweglichkeit ihres Pferdes, damit Sie lange Freude und Erfolg mit Ihrem Pferd haben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Prophylaxe oder zur Therapie bei Erkrankungen, wie z. B.: Wärme-/Kältebehandlung, Einreibungen, professionelle Hufpflege, Physiotherapie, schulmedizinische sowie alternative Behandlungsmethoden.

Eine seit vielen Jahren eingesetzte Behandlungsform ist die pulsierende Magnetfeldtherapie.

Seit 12 Jahren setzen Therapeuten und Pferdebesitzer EQUIMAG Produkte zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Krankheitsbilder ein. Nun stellen wir ihnen eine EQUIMAG-Neuheit vor: EQUIMAG arthro**care** – ein Gerät speziell für den Einsatz am Pferdebein.

Die Besonderheit

- In dem Impulsgeber ist eine impulsgebende Spule eingebaut zur lokalen Anwendung an erkrankten Gelenken, und Sehnen sowie bei Verletzungen.
- Um den Impulsgeber am Pferdebein anzubringen, ist im Lieferumfang eine Neoprengamasche enthalten, an welcher der Impulsgeber in einer Schutztasche angeklebt wird. So erreichen sie alle zu behandelnden Stellen, wie Gelenke, Sehnen und Hufe.

Der Impulsgeber ist mit einer Automatik ausgestattet, die ein Spektrum von entzündungshemmenden, schmerzlindernden Frequenzen enthält. Zu diesen Frequenzen können sie zusätzlich Einzelfrequenzen von 2 Hz bis 19 Hz zuschalten. Einzelfrequenzen bedeuten eine Erweiterung des Wirkfensters, wie z. B. Anregung von Stoffwechsel und Durchblutung.

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete:

Bei Pferden an Sehnen, Gelenken, Hufen, bei Verletzungen, vor und nach starker Beanspruchung, zur Rekonvaleszenz. Bei Kleintieren mit Gelenk- und Sehnenproblemen.

Optional kombinierbar mit: EQUIMAG Gamasche, EQUIMAG Intensivstab und EQUIMAG Kompaktdecke (nicht geeignet für EQUIMAG Basis- und Profidecke). Die Applikatoren sind an den Impulsgeber mittels eines Adaptersteckers anzuschließen. So ist es möglich, auch den ganzen Körper zu behandeln.

